

GEBRUIKERSHANDLEIDING

B L U M I L *SPORT*



Inhoudsopgave

.....	3	INLEIDING	4	3
TECHNISCHE	3	SPECIFICATIES	4	3
.....	3	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	5	3
.....	5	ONDERDELEN	8	5
DISPLAY EN	7	KNOPPEN	12	7
DE BATTERIJ INSTALLEREN/	8	VERWIJDEREN	13	8
.....	8	OPLADEN	13	8
BLUMIL SPORT VERBINDEN MET EEN	9	ROLSTOEL	14	9
DE STUURKOLOMHOEK	11	AANPASSEN	17	11
ROLSTOELEN MET HOGE	12	VOETPLATEN	18	12
DE	12	RIT	19	12
ONDERHOUD VAN HET	13	ACCUPAKKET	19	13
BLUMIL	13	GARANTIE	20	13

INTRODUCTIE

Gefeliciteerd! Welkom bij de BLUMIL familie!

BLUMIL SPORT is een unieke oplossing, waarmee u uw handbewogen rolstoel met stijf frame kunt omtoveren tot een elektrische handbike. U kunt dit doen door gewoon op een knop te drukken. BLUMIL SPORT maakt het mogelijk voor miljoenen mensen over de hele wereld om te genieten van een nieuw gevoel van vrijheid.

Pak je helm en laten we een ritje maken, je staat op het punt om ECHTE VRIJHEID te ervaren met je BLUMIL SPORT!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max SNELHEID	25 km/h
Bereik	Vanaf 60 km
Batterij	696 Wh
Motorvermogen	500 Watt (tijdens afdrukken)
Klimhoek	van 10 %
Wiel diameter	12"
Max gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht met batterij	18 kg

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle onderstaande vereisten voor de rijder leest en eraan voldoet en dat u zich bewust bent van alle risico's van het rijden zoals vermeld in deze handleiding voordat u probeert te rijden met BLUMIL SPORT.

- Vanwege de mogelijkheid om hoge snelheden te bereiken, wordt het aanbevolen om een helm te dragen.
- Rijd niet over stoepranden hoger dan 5 cm.
- Rijd niet door plassen of water. De elektronica is enkel spatwaterdicht.
- Het hulpstuk mag alleen worden gebruikt om één persoon tegelijk te vervoeren. Elk ander gebruik is niet toegestaan.
- Het wordt aanbevolen dat BLUMIL SPORT alleen wordt gebruikt door mensen die fysiek en mentaal in staat zijn om te voldoen aan de eisen van het verkeer op de openbare weg.
- Houd er rekening mee dat wanneer u op de openbare weg rijdt, de handbike onderworpen is aan alle verkeersregels.
- Beginners moeten bijzonder voorzichtig zijn tijdens het rijden.
- Maak uzelf vertrouwd met de remweg voor verschillende snelheden.
- U moet zich ook vertrouwd maken met de algemene verkeersvoorschriften.
- Om gestaag in een rechte lijn te kunnen bewegen, vermijdt u plotselinge stuurbewegingen bij het rijden op hoge snelheid of in bochten.

- Een driewielig voertuig is altijd minder stabiel dan een vierwielig voertuig.
- Bij het rijden, remmen en manoeuvreren moet het stuur met beide handen stevig worden vastgehouden. Anders is er kans op een ongeluk.
- De snelheid moet worden aangepast aan de technische mogelijkheden van de handbike, de terreinkenmerken en de vaardigheden van de bestuurder.
- Wees voorzichtig bij het rijden over stoepranden, hobbels, enz., Omdat de handbike kan kantelen.
- De rijstijl moet worden aangepast aan uw vaardigheden.
- Wees voorzichtig en rijd langzaam, vooral in bochten.
- Voordat u op heuvels rijdt, moet u vertrouwd raken met het product op een vlakke ondergrond.
- Vertraag het bereiken van een bocht en leun voorover naar de binnenkant van de bocht.
- Een set met de Blumil Go heeft een grotere draaicirkel dan de rolstoel zelf, waardoor het soms onmogelijk kan zijn om op krappe plekken, zoals gangen, te draaien.
- Op heuvels is de grip van het aandrijfwiel minder dan op vlakke wegen, wat minder remkracht betekent. De rijstijl en snelheid moeten altijd worden aangepast aan de omstandigheden, zodat het product op elk moment kan worden gestopt zonder enig gevaar te veroorzaken.
- Om omvallen te voorkomen moeten obstakels zoals stoepranden bij lage snelheid altijd naar voren/loodrecht worden overgestoken. De maximale hoogte van obstakels is 50 mm, maar het hangt af van de afstand tussen de voorwielen tot het oppervlak, en dus van de instellingen van het opzetstuk en de verbinding met de Blumil SPORT.
- Bij het bewegen op nat wegdek wordt het risico op uitglijden vergroot door de mindere grip van de banden. In deze situatie moet de rijstijl dienovereenkomstig worden aangepast.
- Door te rijden in de rolstoel met Blumil SPORT bevestigd, riskeert u ernstig letsel of de dood door vallen, verlies van tractie, verlies van evenwicht, botsingen en andere ongevallen.
- Rijd niet met BLUMIL SPORT tenzij het goed is aangepast aan uw individuele behoeften.
- Probeer niet te rijden wanneer de batterij-indicator geen balken weergeeft (leeg is).
- Houd obstakels zoals riemen, kleding, sieraden en tassen uit de buurt van de wielen en andere bewegende delen.
- Wees je te allen tijde bewust van de voetsteun, omdat deze kan aanslaan op steile hellingen of andere obstakels en instabiliteit kan veroorzaken met BLUMIL.
- Ga niet op oppervlakken die steiler zijn dan 10%.
- Probeer geen trappen te gebruiken om tussen verschillende niveaus te bewegen, omdat dit kan leiden tot een ongeluk.
- Vermijd oppervlakken bedekt met ijs, olie of andere gladde stoffen.
- Tijdens het gebruik en onderhoud van de Blumil kunnen sommige lichaamsdelen verstrikt raken in de elementen van Blumil. Je moet heel voorzichtig zijn. Zorg er voor iedere ingebruikname van de Blumil altijd voor dat de bouten goed vastgeschroefd zitten.
- Houd uit de buurt van kinderen jonger dan 5 jaar
- Bescherm tegen vuur en brandbare stoffen.

DELEN



1. Remhendel

2. Hoorn

3. Weergave

a. Batterij laad indicator

b. Snelheid

c. Afstand

d. Rijmodus

4. Batterij

5. Knop Aankoppelen / loskoppelen

6. Gas geven

7. Achteruitversnelling

8. Beeldscherm

a. (+)

b. aan/uit

c. (-)



9. Band

10. Remschijf

11. snelspanner lengte instelling

12. Stuurwiel hoekverstelling

13. Omslag

14. Slot

15. USB-aansluiting

16. Middelste beugel



17. Oplaadpoort

18. Hoofdschakelaar

DISPLAY EN KNOPPEN

Snelheidsindicator: geeft de snelheid weer

Afstandsindicator: geeft de kilometerstand weer

Power indicator: Toont de batterijcapaciteit

Rijmodus: Als u op de knoppen (+) en (-) drukt, wordt de maximumsnelheid gewijzigd:

1 - 6 km / u

2 - 15 km /u

WAARSCHUWING: *Mode 3 is voor ervaren bestuurders en wordt op eigen risico ingeschakeld.*

Lichtschakelaar: raak de knop van de centrale displaycontroller aan om de lichten aan / uit te schakelen

Hoorn: raak de hoornknop aan om de hoorn te laten klinken

Aanvullende informatie: Als u twee keer snel op de knoppen (+) en (-) drukt, wordt aanvullende informatie over de reis weergegeven

DE BATTERIJ INSTALLEREN/VERWIJDEREN

1. Schakel de batterij uit
2. Ontgrendel de batterij met de sleutel
3. Schuif de batterij omhoog en trek hem naar je toe.
4. Plaats tijdens de installatie de batterij voorzichtig verticaal en vergrendel deze met de sleutel



OPLADEN

1. Schakel de stroom uit
2. Open de plastic oplaadpoortstekker

3. Sluit de oplaadkabel aan

4. Sluit na voltooiing de plastic plug

BLUMIL SPORT VERBINDEN MET EEN ROLSTOEL

Om blumil sport aan te sluiten op de rolstoel bepaalt u de lengte van de middenbeugel.



Om BLUMIL SPORT aan te sluiten, is het noodzakelijk om de rolstoel naar de voorkant van de bumper te rijden [1]. De middelste beugelhaak [2] moet zich boven de achterste stang van de rolstoel bevinden. (In sommige rolstoelmodellen wordt de toegang tot deze bar geblokkeerd door een andere constructiebalk van de rolstoel - vooral Panthera-modellen. In dit geval kan de haak aan die balk worden bevestigd.) Als tijdens het naderen de centrale beugel vast komt te zitten, moet deze omhoog of omlaag worden gebracht met behulp van de knoppen **Verbinding verbreken** en **Verbinden** [3]. Als de voorkant van de voetsteun in contact staat met de bumper, kunt u op de **connect-knop** drukken . De voorkant van de rolstoel begint omhoog te komen. Houd de knop ingedrukt totdat de klem op de voetsteun van de rolstoel rust. Zorg er na het aansluiten voor dat het systeem stevig is aangesloten door de stuurgreep van links naar rechts te bewegen, zodat er geen beweging is.

Als de voorwielen van de rolstoel niet tot een hoogte van ten minste 2 cm stijgen, moet een andere positie van de voetsteun ten opzichte van de bumper worden ingesteld. Om dit te doen, moet u de haak van de centrale beugel met een paar centimeter verlengen en de rolstoel opnieuw besturen om deze aan te sluiten op Blumil SPORT - dit keer verder weg van de bumper en de verbindingsprocedure herhalen.


WAARSCHUWING: <i>Als u na het aansluiten te lang op de Connect-knop drukt, kan het rolstoelframe of de BLUMIL SPORT beschadigd raken.</i>

Om het systeem los te koppelen, drukt u op de knop Ontkoppelen en houdt u deze ingedrukt totdat de voorwielen van de rolstoel zijn neergelaten en de centrale beugel boven de achterstang van de rolstoel uitsteekt. Je kunt je dan vrij bewegen met de rolstoel.

Voetsteun naast de bumper

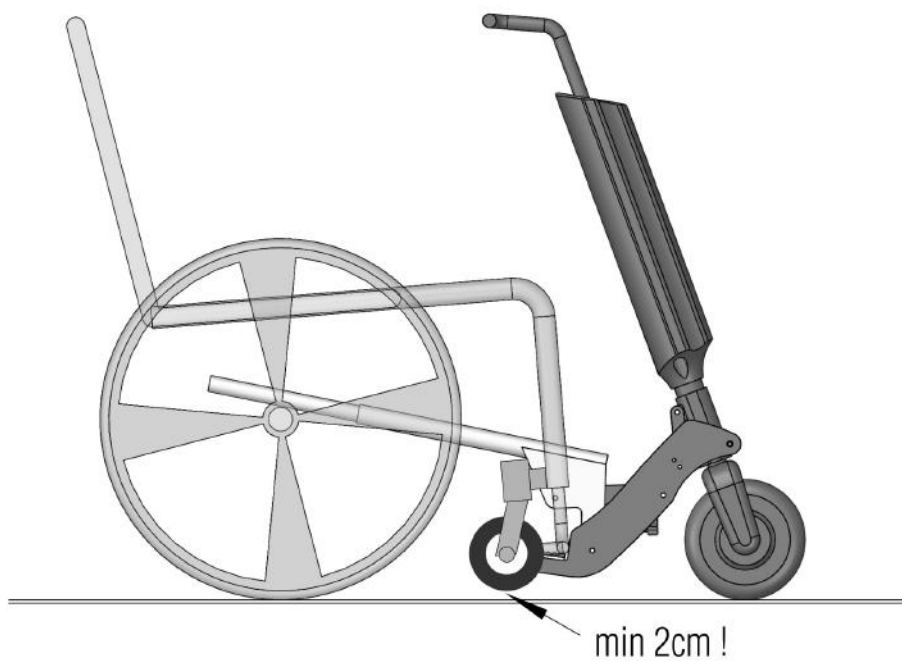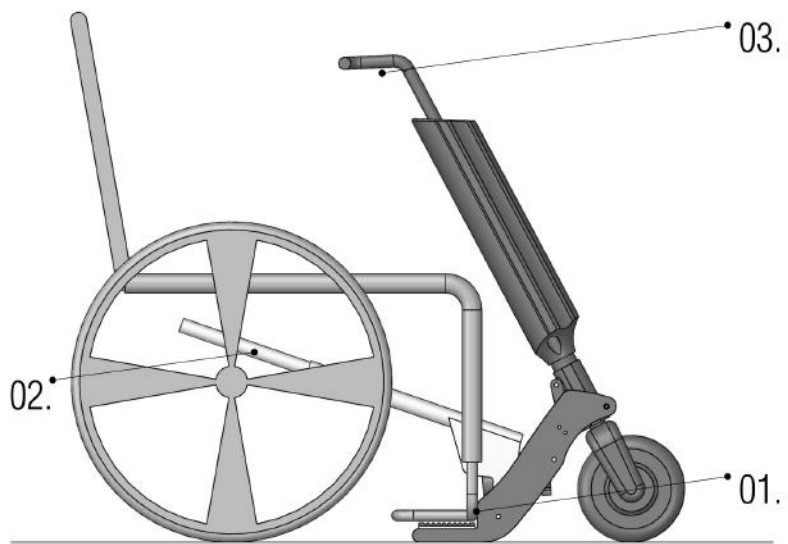

Voetsteun uit de buurt van de bumper

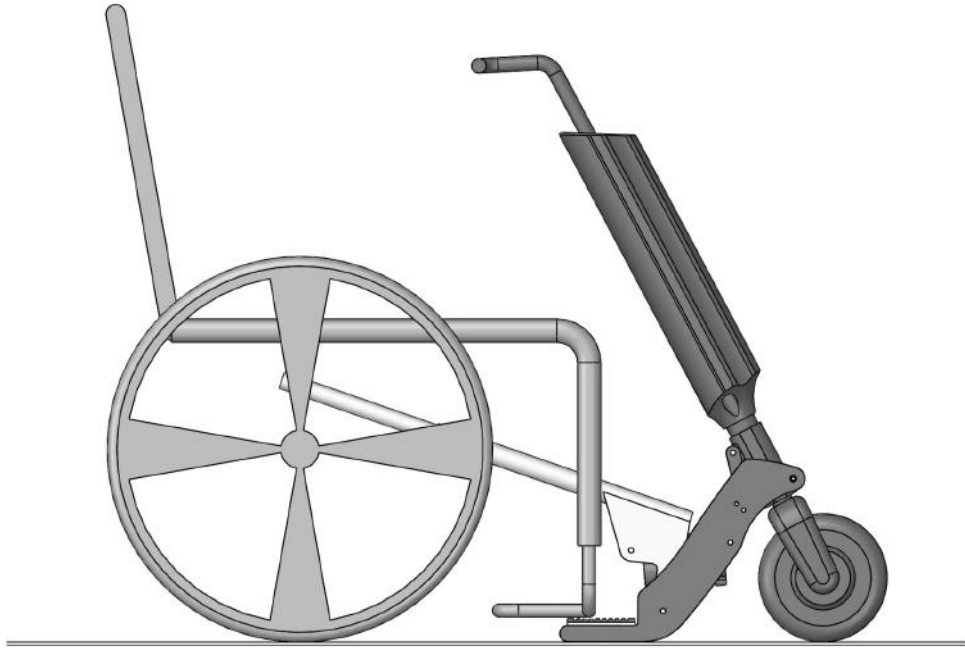

DE HOEK VAN DE STUURKOLOM AANPASSEN

Om de rit zo comfortabel mogelijk te maken, moet de afstand tussen het stuurwiel en de gebruiker dienovereenkomstig worden ingesteld. Dit kan door de hoek van het stuurwiel aan te passen. Volg deze stappen om de stuurkolom dichterbij of verder te plaatsen:

1. Maak de stuurkantelschroef los
2. Bepaal de juiste hoek door het stuur naar voren of naar achteren te bewegen
3. Draai de kantelschroef van het stuurwiel zeer stevig vast


OPMERKING: *Het aanpassen van de hoek heeft invloed op hoe hoog de voorwielen van de rolstoel van de grond worden geheven.*




ROLSTOELN MET HOGE VOETPLATEN

Omdat elke rolstoel een beetje anders is en is ingesteld op de specifieke behoeften van de gebruiker, kunnen enkele extra aanpassingen nodig zijn. Als u niet in staat bent om met uw rolstoel naar de bumper te komen, omdat de klem de voetplaat blokkeert, kan het nodig zijn om de meegeleverde langere schroeven (M6x70) te gebruiken. Dit kan in een paar stappen:

1. Verwijder de rubberen statieven door de 4 M6x70 schroeven los te draaien.

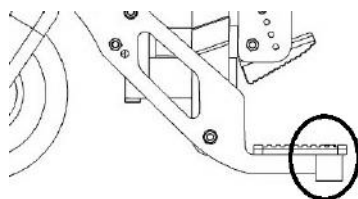

2. Steek door de gaten langere schroeven die zijn meegeleverd.
3. Schroef de extra moeren (1 aan elke kant) stevig vast, zodat de schroeven niet bewegen.
4. Schroef de resterende 4 moeren (1 aan elke kant) ongeveer halverwege vast - ze zijn nodig voor de volgende stap.
5. Schroef de 4 rubbers zo stevig mogelijk vast en blokkeer ze met de moeren die je in de vorige stap hebt geïnstalleerd.

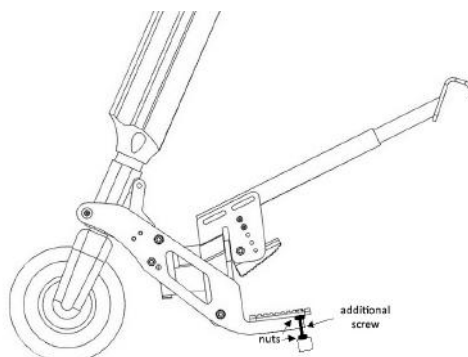

DE RIT

Hier zijn enkele basisregels die u moet lezen voordat u de BLUMIL SPORT gebruikt. Het moet voorzichtig worden

gebruikt. Besteed speciale aandacht aan waarschuwingen en instructies in deze handleiding.

Begin tijdens de eerste rit op BLUMIL SPORT met een vlakke ondergrond met goede grip, vrij van obstakels.

WAARSCHUWING: *Controleer voor het rijden of de aanpassingen volgens de instructies zijn uitgevoerd.*

WAARSCHUWING: *Rijd niet op moeilijk terrein totdat u ervaring heeft met rijden.*

Om te accelereren, drukt u op de gashendel.

Om te vertragen of te stoppen, drukt u op een van de remmen. Om volledig te stoppen, is het noodzakelijk om de hendelrem in te drukken.

Bij het rijden op te steile heuvels kan de Blumil SPORT zichzelf uitschakelen om oververhitting en beschadiging van de motor te voorkomen.

ONDERHOUD VAN HET ACCUPAKKET

De batterij is het belangrijkste onderdeel van de rit. Volg de onderstaande stappen om de levensduur van de batterij te maximaliseren:

1. Lees zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen op het batterij-etiket en volg de instructies
2. Probeer de batterij op 0 ° C - ~ 40 ° C in een kamertemperatuur te houden, wat de prestaties van de batterij zal verbeteren. Vermijd temperaturen onder de -20 graden of boven de 50 graden.
3. Bewaar de batterij in een koele, droge omgeving. In een gesloten, natte omgeving kan het batterijpakket worden gecondenseerd en kan water de batterij beschadigen.
4. Probeer tijdens dagelijks gebruik te voorkomen dat de batterij volledig wordt ontladen. Laad zo snel mogelijk op wanneer het LCD-scherm slechts 10% ~ 20% aangeeft. Als de batterij leeg blijft, kan de batterij permanent worden beschadigd.

BLUMIL GARANTIE

BLUMIL Beperkte Garantie

BLUMIL wordt gedekt door een fabrieksgarantie van 1 jaar tegen eventuele defecten in materialen en vakmanschap, beginnend op de datum van aankoop, en alleen voor de oorspronkelijke koper bij niet-commercieel gebruik. Elk vervangend onderdeel of product dat is geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de verkoper, gaat uit van de resterende originele garantie of maximaal 90 dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van wat langer is.

Procedure voor garantieservice

Voordat u een onderdeel of product retourneert voor garantieservice, moet u eerst contact opnemen met de gecertificeerde wederverkoper bij wie u uw BLUMIL-product hebt gekocht. Als een dergelijke wederverkoper niet bestaat, moet u contact opnemen met BLUMIL via e-mail op info@blumil.com. Als het onderdeel of product in kwestie defect en garantievrij blijkt te zijn, bent u verantwoordelijk voor het terugsturen van het onderdeel of product naar BLUMIL of de gecertificeerde wederverkoper bij wie u uw BLUMIL-product hebt gekocht. BLUMIL of de gecertificeerde wederverkoper is verantwoordelijk voor de retourzending naar u. Als het product niet gegarandeerd is, kunt u een vervangend onderdeel kopen en moet u betalen voor verzending.

Uitsluitingen van garantie

De BLUMIL-garantie dekt niet en is nietig voor defecten of schade als gevolg van ongevallen, botsingen, slecht weer, waterschade, verkeerd gebruik of misbruik, verwaarlozing, wijzigingen, onjuiste installatie, bediening of onderhoud.